


IV Hat Düzenleyici

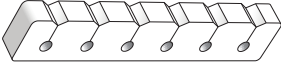


Tek bir hastaya bağlanan birden fazla IV hattının (en fazla 6) ayrılması ve düzenlenmesi amacıyla geliştirilmiştir.

Kullanım Talimatları

Tek Cihazın Kurulumu

1. Her IV hattını tek tek, kendi yuvasına yerleştirin.
2. Kıvrılma veya bükülme olup olmadığını görmek için tüm hatları kontrol edin.
3. Cihazı:

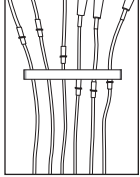


- IV hattına asabilirsiniz ya da.
- Hastanın yatağına düz bir şekilde yerleştirebilirsiniz.

Birden Fazla Cihazın Kurulumu

1. En fazla üç IV Hat Düzenleyici cihazını şu noktalara yerleştirin:

- İnfüzyon pompasının altına. (Proksimal)
- IV hattının orta kısmına. (Ara)
- Hastaya en yakın alt enjeksiyon portunun yanına. (Distal)

2. Her hattı, her cihaz üzerindeki karşılık gelen yuvasına yerleştirin.

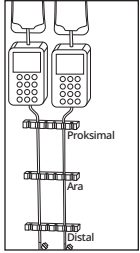

3. Yerleştirme işleminden sonra kıvrılma veya bükülme olup olmadığını görmek için tüm hatları kontrol edin.

Tek hastada kullanım içindir. Tek kullanımlıktır.

Kullanıcıya ve/veya hastaya not: Bu ürünle ilgili bir ciddi olay yaşanması durumunda, bu olay üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın ikamet ettiği ülkenin yetkili makamına bildirilmelidir.

Patent www.dalemed.com/patents

Dale, Dale Medical Products, Inc. firmasının ABD, AB ve Birleşik Krallık'ta tescilli ticari markasıdır.



Dale Medical Products, Inc.

40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



MDSS CH GmbH

Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

